



خالٍ من الهرمونات
في خدمة النساء، مستديم وأمين

Flexi~T[®]

Flexi~T[®]₃₀₀

- فعال بنسبة 99%
- حجم صغير، 300 مم 2 من النحاس
- للنساء ذوات رحم صغير
(طول الرحم ≤ 5 سم)
- CNK 4345-310




Flexi~T[®]₊₃₀₀

- فعال بنسبة 99%
- حجم متوسط، 300 مم 2 من النحاس
- للنساء ذوات رحم كبير (طول الرحم < 6 سم)
- CNK 4345-328



Flexi~T[®]₊₃₈₀

- فعال بنسبة 99%
- حجم متوسط، 380 مم 2 من النحاس
- للنساء ذوات رحم كبير (طول الرحم < 6 سم)
- CNK 4345-336

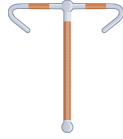

Flexi-T - وسيلة منع حمل خالية من الهرمونات

Flexi-T هو لولب نحاسي موثوق به بدون هرمونات وهو مثالي للنساء اللواتي يفضلن وسائل منع الحمل الخالية من الهرمونات. يتم الحفاظ على الدورة الطبيعية ويمكنك ممارسة الجنس دون قلق. يتميز لولب Flexi-T بشكل حرف T مع زوايا مدوّرة من أجل الحصول على أفضل مقاس وهو مصنوع من مواد اصطناعية والنحاس. يتوفر لولب Flexi-T بـ 3 أنواع مختلفة ولذلك فهناك نوع مناسب لكل امرأة. يوثق باللولب لمدة 5 سنوات. يعمل لولب Flexi-T أيضًا كوسيلة طارئة لمنع الحمل إذا تم تركيبه في غضون 5 أيام من ممارسة الجنس غير الآمن.

العمل والتركيب

يسهل تركيب لولب Flexi-T بواسطة طبيب أمراض النساء أو طبيب الأسرة.
كيف يعمل اللولب:

- النحاس يشل الخلايا المنوية مما يمنع البويضة من التخصيب
 - النحاس يمنع البويضة من الانغراس في بطانة الرحم
- يفرز اللولب مباشرة بعد التركيب تدريجياً القليل من النحاس وتكونين محمية من الحمل لمدة 5 سنوات.

الفحص اللاحق

حددي موعداً لإجراء فحص جسدي لاحق بعد 6 أسابيع من تركيب اللولب. سيتحقق مقدم الرعاية مما إذا وجد اللولب في مكانه الصحيح ويمكنك مناقشة أي شكوى.

متى لا يُسمح باستخدام لولب Flexi-T؟

- نزيف مهبلي غير موضح
 - التهاب حاد في النظام التناسلي
 - خلل في الرحم
 - حساسية من النحاس
 - الحمل
- إذا كنت مصابة بمرض ويلسون فتشاورني أولاً مع الطبيب المعالج فيما إن كان من الممكن استخدام لولب نحاسي.



الأعراض الجانبية

قد تختلف دورتك الشهرية عن المعتاد في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التركيب. معظم النساء لا يشعرن بأي انزعاج بسبب اللولب أو بانزعاج بسيط فقط. قد تكون للبعض الآخر آثار جانبية مثل:

- دورة شهرية غزيرة وطويلة و / أو غير منتظمة
- أمغاص في البطن (شديدة في بعض الأحيان)
- فقدان الدم بين دورة وأخرى

سيعتاد جسمك على اللولب وتستعيد الدورة الطبيعية بعد حوالي ثلاثة أشهر. يفقد عدد قليل من النساء كمية أكبر بقليل من الدم بشكل دائم أثناء الحيض.

لولب Flexi-T أقل ملاءمة للنساء اللواتي لهن دورة شهرية غزيرة بطبيعتها ويعانين من هذا.

استخدام كوب الحيض

لقد اتضح من الأبحاث أن النساء يفقدن اللولب كثيرًا ما عند استخدام كوب الحيض. لهذا يوصى بعدم استخدام كوب الحيض مع اللولب.

إذا كنتِ ترغبين في استخدام كوب الحيض رغم ذلك فلا تفعلي هذا إلا بعد ثلاثة أشهر من تركيبه. أنهي حالة الفراغ قبل إخراج كوب الحيض وتأكدي دائمًا من عدم وجود اللولب في الكوب.

التعويض

يتم التعويض عن تكلفة Flexi-T بالكامل لجميع النساء دون سن 25 بشرط الحصول على اللولب من خلال الصيدلية.

الطلب

يتوفر Flexi-T في الصيدلية ويكلف 79 يورو (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة). يمكنك أيضًا طلب Flexi-T عبر الإنترنت على موقع: www.titushealthcare.be/shop

هذا المنشور هو تكملة لنشرة معلومات المريض. اقرئي دائمًا النشرة الدوائية قبل طلب تركيب لولب Flexi-T.

منع الحمل الخالي من الهرمونات

تستخدم **180** مليون امرأة اللولب النحاسي
في جميع أنحاء العالم

الموثوقية **99%**

حماية لمدة **5**
سنوات

20% من النساء
يفضلن اللولب



Aalsmeerderdijk 158C
1438 AX Oude Meer
Nederland

info@titushealthcare.be
www.titushealthcare.be